

ORTOSERVIS

s námi zůstanete v pohybu

Chodítko

STABILO G3 GF



Návod k použití

Obsah

Výrobce	2
Indikace	3
Kontraindikace	3
Balení obsahuje	4
Sestavení chodítka	4
Popis a použití chodítka	6
Technické parametry	8
Skladování, čištění a údržba	9
Servis	9
Záruka	10

Výrobce

Ortoservis s.r.o.
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8 – Libeň

www.ortoservis.cz
tel. +420 266 313 652

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Chodítko STABILO G3 GF je zdravotnický prostředek určený pro nácvik stoje a chůze osob se sníženou pohyblivostí. Dále je určený k rehabilitaci dolních končetin (nácvik chůze po operaci kolenních, kyčelních kloubů a dalších diagnózách, které vyžadují při rehabilitaci odlehčení dolních končetin).

Chodítko svou konstrukcí a opěrnou deskou zajišťuje přenesení zatížení dolních končetin při stoji a chůzi na trup a ruce. Tím usnadňuje chůzi osobám s omezenou funkcí dolních končetin nebo s celkovou sníženou pohyblivostí. Opěrná deska spolu s úchopovými madly zvyšuje stabilitu uživatele při stoji a chůzi, a zároveň umožňuje řídit směr pohybu chodítka.



Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Chodítko STABILO G3 GF musí být vždy používáno pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Indikace


Osoby vyžadující pro nácvik stoje a chůze dodatečnou oporu a stabilitu, osoby se sníženou pohyblivostí, osoby se zachovanou částečnou funkcí dolních končetin.

Kontraindikace

Osoby nižší než 150 cm a vyšší než 200 cm, osoby se sníženou mentální schopností chápat rizika spojená s pohybem v chodítku, osoby s hmotností nad 150 kg.

Chodítko je určeno jak pro použití koncovým uživatelem (laikem), tak odborným personálem ve zdravotnických zařízeních. Chodítko je vhodné pro osoby s tělesnou výškou 150–200 cm.

Balení obsahuje:

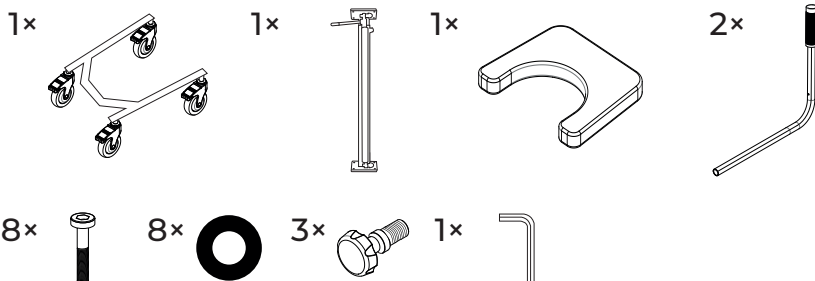

Pro sestavení chodítka budete dále potřebovat (není součástí balení):



Sestavení chodítka

Vybalte všechny části chodítka z přepravního obalu. Pomocí nůžek odstříhnete samovázací pásky, které drží konstrukci na přepravní desce. Chodítko sestavte podle obrázku viz strana 5:

KROK 1

Zatlačením dolů zaaretujte brzdu u obou zadních koleček podvozku ve tvaru U, aby se konstrukce při montáži nepohybovala.

KROK 2

Šedý středový nosník s plynovou vzpěrou přišroubujte k podvozku ve tvaru U pomocí 4 šroubů s imbusovou hlavou. Pod každý šroub použijte přiloženou podložku. Šrouby pevně dotáhněte imbusovým klíčem.

POZOR – středový nosník s plynovou vzpěrou MUSÍ být nakloněn dozadu mezi ramena podvozku ve tvaru U. Ovládací páčka plynové vzpěry je při montáži v horní části středového nosníku.

KROK 3

Na horní část středového nosníku s plynovou vzpěrou přišroubujte konstrukci opěrné desky pomocí 4 šroubů s imbusovou hlavou.

POZOR – opěrná deska MUSÍ svým vykrojením směřovat mezi ramena

Chodítko STABILO G3 GF



ORTOSERVIS

podvozku ve tvaru U. Pod každý šroub použijte přiloženou podložku. Šrouby pevně dotáhněte imbusovým klíčem.

KROK 4

Do horní části středového nosníku s plynovou vzpěrou našroubujte aretační šroub. Aretační šroub zatím zcela nedotahujte, aby bylo možné pomocí plynové vzpěry nastavit požadovanou výšku chodítka (viz. dále Nastavení chodítka)

KROK 5

Do otvorů na spodní straně opěrné desky vložte madla a zafixujte je pomocí 2 plastových aretačních šroubů.

Popis a použití chodítka

Chodítko je tvořeno kovovou konstrukcí se čtyřmi kolečky a opěrnou deskou. Zadní kolečka jsou doplněna nášlapnými brzdami. Chodítko má centrální nosník z nerezů a díky tomu je jeho konstrukce velmi tuhá i při maximálním vysunutí opěrné desky do výšky 135 cm nad zemí. Vykrojení opěrné desky má šířku 40 cm a umožňuje použití i osobám s mohutnějším hrudníkem.

Opěrná deska je výškově nastavitelná pomocí plynové pružiny s možností pevné aretace. Přední madla jsou délkově nastavitelná a lze nastavit i jejich sklon.

Chodítko je vhodné i pro osoby velmi vysokého vzrůstu (do 200 cm). Nosnost 150 kg.

Chodítko je určeno jak k použití uvnitř budov, tak venku na hladkém a zpevněném povrchu.

Chodítko je vyráběno také ve variantě STABILO G3 GF ENG – tato varianta má užší opěrnou desku a užší rozvor podvozku, tak aby prošla dveřmi o šířce 60 cm. Tato varianta je svými rozměry vhodná pro použití v domácí péči.



Chodítka nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5° (na rampách a schodištích). Je zakázáno používat chodítka k přepravě nepohyblivých osob nebo nákladů.



Pokud je chodítka používáno uživatelem (laikem), musí být uživatel vždy schopen k chodítka bezpečně vstát a následně opět usednout. Zároveň musí být uživatel schopen vždy dostatečně silně uchopit madla, tak aby mu chodítka poskytlo požadovanou stabilitu při stoji a chůzi. Nutná je také alespoň částečná funkce obou dolních končetin. Uživatel musí být schopen vnímat a rozeznávat běžná rizika spojená s pohybem chodítka v prostředí interiéru nebo zdravotnického zařízení a dbát pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Pokud uživatel (laik) nezvládá činnosti uvedené výše, je vždy nutný při použití chodítka dohled další dospělé osoby, aby nedošlo k pádu nebo zranění uživatele.

Nastavení chodítka podle požadavků uživatele

Výšku opěrné desky chodítka lze nastavit pomocí plynové vzpěry dle potřeby uživatele v rozsahu 93–135 cm.

- Před prvním použitím nastavte výšku opěrné desky a pozici madel.
- Výšku opěrné desky lze jednoduše měnit pomocí ovládací páčky na plynové pružině (viz obrázek na straně 5).
- Před změnou výšky opěrné desky je VŽDY nutné povolit aretační šroub na středovém nosníku. Po nastavení požadované výšky je opět nutné VŽDY aretační šroub pevně dotáhnout. (viz obrázek na straně 5).
- Pro zvednutí opěrné desky posuňte ovládací páčku na plynové pružině směrem nahoru (viz obrázek na straně 5). Opěrná deska se začne vysouvat směrem vzhůru.
- Pro snížení opěrné desky posuňte ovládací páčku směrem nahoru (plynová pružina se odemkne) a dlaní zatlačte shora na opěrnou desku tak, abyste ji snížili do požadované výšky.

ORTOSERVIS

- Po dosažení požadované výšky opět pevně dotáhněte aretační šroub.
- Posunem opěrné desky směrem nahoru/dolů nastavte její požadovanou výšku podle potřeby uživatele.
- Správné nastavení výšky opěrné desky poznáte tak, že pokud si uživatel opře horní končetiny o opěrnou desku a uchopí madla, stojí přitom vzpřímeně a lokty nejsou výše než podpaží.
- Nesprávné nastavení výšky opěrné desky poznáte tak, že uživatel stojí v chodítku v přílišném předklonu / nebo záklonu.
- Pro nastavení polohy madel povolte 2 aretační šrouby (viz obr. KROK 5).
- Madla lze nastavit v předozadním směru podle délky předloktí a dále lze nastavit sklon madel podle rotace v zápěstí.
- Správné nastavení madel poznáte tak, že při úchopu madel spočívají oba lokty na opěrné desce.
- Pokud chodítko používá více uživatelů, VŽDY jej před použitím nastavte podle tělesné výšky konkrétního uživatele.
- Nastavení výšky opěrné desky chodítka a poloha madel musí VŽDY respektovat zdravotní stav uživatele a jeho fyzické schopnosti.



Nesprávně nastavená výška chodítka nebo nedotažení aretačních šroubů může vést k pádu nebo zranění uživatele.

Technické parametry

Výška opěrné plochy:	nastavitelná v rozsahu 93–135 cm
Kolečka:	průměr 12,5 cm
Celková šířka:	67 cm (varianta ENG pouze 57 cm)
Celková hloubka:	74 cm
Nosnost chodítka:	150 kg
Celková hmotnost:	21,2 kg

Skladování, čištění a údržba

Chodítka musí být skladováno v suchém a čistém prostředí bez vlivu chemických látek, mimo dosah dětí a domácích zvířat, mimo zdroje tepelného záření, mimo nepříznivé povětrnostní vlivy (nenechávejte chodítka dlouhodobě na přímém slunci, atd.).

Všechny díly chodítka udržujte čisté a suché.

Pro čištění všech částí chodítka použijte hadřík navlhčený vodou s jemným saponátem. Po čištění vždy osušte všechny části chodítka do sucha. Hadřík nesmí pouštět vlákna. Chodítka pravidelně čistěte tak, aby na něm neulpíval agresivní pot a jiné druhy znečištění.

Při použití chodítka u více uživatelů, dezinfikujte opěrnou desku a madla VŽDY po použití každým uživatelem. Pro dezinfekci používejte látky na bázi alkoholu, které se rychle odpařují. Dezinfekci provádějte v dobře větraných prostorech.

Výrobek není určen ke sterilizaci.



- K dezinfekci a čištění NIKDY nepoužívejte desinfekční prostředky na bázi chlóru. Chlór výrazně snižuje životnost opěrné desky a madel.
- Při používání chodítka VŽDY dbejte na to, aby nedošlo k poškození opěrné desky ostrými předměty (např. náramkové hodinky, náramky, prsteny, zipy u rukávů, atd.) nebo špatným skladováním (odkládání / pád ostrých předmětů na opěrnou desku, atd.).

Servis

Chodítka nevyžaduje specifické pravidelné servisní úkony nebo výměny náhradních dílů. Přesto doporučujeme:

- 1× týdně zkontrolujte všechna kolečka chodítka, zda na nich nejsou namotané vlasy nebo kousky jiných nečistot. Pokud se kolečka volně neotáčejí, odstraňte namotané kousky nečistot.

ORTOSERVIS

- Před každým použitím zkontrolujte chodítko, zda nevykazuje známky poškození, zda je konstrukce pevná a všechny aretační šrouby dotažené.
- Pokud chodítko vykazuje jakékoliv známky poškození nebo chybné funkce, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce/výrobce.

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vady nebo nekompletnost výrobků. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a nešetrným používáním výrobku, užíváním k jinému účelu než je uvedeno v tomto návodu k použití, zanedbáním běžné údržby výrobku, nesprávným skladováním, konstrukčním zásahem do výrobku nebo opotřebením obvyklým používáním.

V případě zjištění jakékoliv závady se obraťte výhradně na firmu Ortoservis (výrobce), která zajišťuje záruční i pozáruční opravy.



- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.
- Chodítko vždy udržujte mimo dosah dětí. Zajistěte, aby nedošlo k pádu nebo převrnutí chodítka a poranění dítěte.

Oznámení

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

Prohlášení

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.



Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

Rádi Vám pomůžeme

Věříme, že Vám tento zdravotnický prostředek usnadní řešení Vaší složité životní situace. Pokud byste potřebovali poradit nebo hledáte další pomůcky pro seniory a tělesně postižené, navštivte náš web www.ortoservis.cz a my Vám rádi pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího řešení.

Číslo skladové položky: 20532 (STABILO G3 GF)

Číslo skladové položky: 20533 (STABILO G3 GF ENG)

Datum revize návodu:

STABILO G3 GF/ENG_CZ_Rev. 17/08/2021



ORTOSERVIS

www.ortoservis.cz